



PUISSANT DÉCAPANT LIQUIDE POUR PLÂTRE ET ALGINATE



DISOL-GIPS A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉLIMINER:

- DES RESTES DE PLÂTRE DANS LES SPATULES ET DENTURES EN QUELQUE HEURES
- NETTOYAGE DES PLATEAUX D'IMPRESSION

DISOL-GIPS

PUISSANT DÉCAPANT LIQUIDE POUR PLÂTRE ET ALGINATE.

AVANTAGES

- Réaction rapide: formation de bulles
- Peut être employé en bains d'ultrasons pour accélérer son action
- Conditionnement en liquide, prêt à l'emploi
- Il n'abîme pas les prothèses

MODE D'EMPLOI

Introduire l'objet à nettoyer dans un récipient en verre ou en plastique résistant rempli de **DISOL-GIPS**.

Pour éliminer les restes de plâtre, laisser agir le produit quelques heures, pour éliminer les restes d'alginate, préférez laisser toute la nuit. Rincer à l'eau.

Le liquide **DISOL-GIPS** peut être utilisé pour nettoyer les plateaux d'impression en plastique ou en métal, à l'exception de ceux en aluminium, ainsi que pour le nettoyage des godets de mélange et des spatules.

Il élimine le plâtre des prothèses acryliques, y compris dans les espaces difficiles d'accès, sans affecter la couleur de la prothèse.

STOCKAGE ET PÉREMPTION


La stabilité de **DISOL-GIPS** est de 3 ans lorsque les conditions de stockage sont respectées.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE


1191-300	DISOL-GIPS	3.000 ml
• Prêt à l'emploi		



ELIMINE LA PLÂTRE
DES PROTHÈSES
ACRYLIQUES ET
MÉTALLIQUES

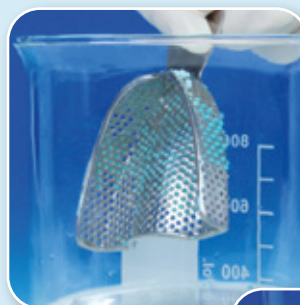

NETTOYAGE
DES PLATEAUX
ET DES RESTES
D'ALGINATES

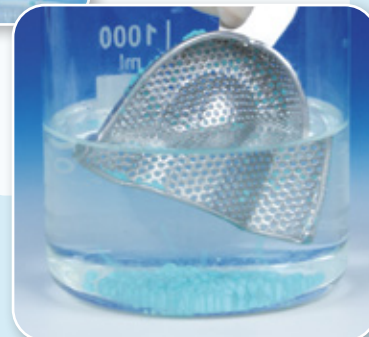

protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com