



## POTENTE LIQUIDO DI PULIZIA PER GESSO E ALGINATO



DISOL-GIPS È STATO APPOSITAMENTE PROGETTATO PER:

- ELIMINARE RESIDUI DI GESSO SU SPATOLE E DENTIERE IN POCHE ORE
- PULIRE I PORTAIMPRONTE



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# DISOL-GIPS

## LIQUIDO DI PULIZIA PER GESSO E ALGINATO.

### VANTAGGI

- Reazione rapida: formazione di bolle
- Si può utilizzare in bagni ad ultrasuoni per accelerarne l'azione
- Formato liquido, pronto all'uso
- Nessun danno protesi

### MODALITÀ D'USO

Introdurre l'oggetto da pulire in un recipiente di vetro o plastica resistente, riempito con **DISOL-GIPS**.

Lasciare agire il prodotto qualche ora per eliminare residui di gesso, e preferibilmente tutta la notte per eliminare resti di alginato. Sciacquare con acqua.

Il liquido **DISOL-GIPS** si può utilizzare per pulire portaimpronte di plastica o metallo, ma non per quelle di alluminio. È inoltre adatto per la pulizia di tazze e spatole.

Elimina il gesso dalle dentiere acriliche persino negli spazi di difficile accesso, senza danneggiare il colore della protesi.

### CONSERVAZIONE E SCADENZA

La stabilità del prodotto ha luogo di 3 anni, essendo rispettando gli stati di immagazzinaggio.


### FORMATO DI VENDITA

1191-300 DISOL-GIPS 3.000 ml


- Pronto per l'uso



ELIMINAZIONE  
DEL GESSO DALLE  
PROTESI

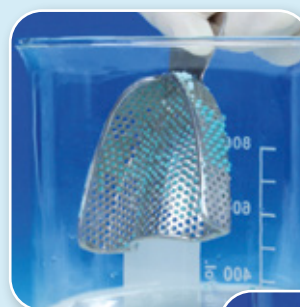

PULIZIA DI  
PORTAIMPRONTE  
E RESIDUI DI  
ALGINATO

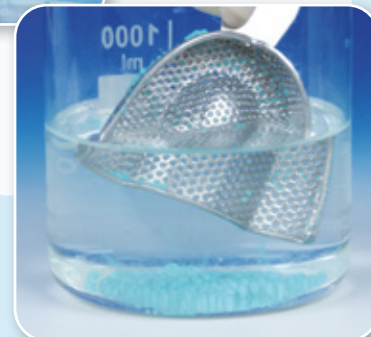

**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**