



MODELLI PROFESSIONALI CON COLORI INTENSI

- GESSO AUTOLIVELLANTE PER LA REALIZZAZIONE DI ZOCCOLI COMPATTI
- ESPANSIONE ADEGUATA PER LA FRIZIONE DEI PERNI
- FLUISCE RAPIDAMENTE. PRIVO DI BOLLE

GESSO DI TIPO 4 • ISO 6873

FLU-STONE

GESSO FLUIDO AUTOLIVELLANTE PER ZOCOLI.

VANTAGGI

- Superficie compatta e liscia
- Facile separazione dei monconi
- Raccomandato per sistemi con perni
- Privo di bolle

MODALITÀ D'USO

Proporzione polvere/acqua:	100 g / 24 ml
Temperatura di lavorazione:	20-23°C
Miscelazione: Meccanica sotto vuoto:	30 sec.
Manuale:	60 sec.

CARATTERISTICHE FISICHE

Tempo di lavorazione:	6 min.
Indurimento iniziale:	8 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Indurimento finale:	11 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Espansione durante l'indurimento (2 h.):	0,05%
Resistenza alla compressione (1 h.):	> 40 MPa

FORMATO DI VENDITA




Eco-Pack 6 kg (3 x 2000 g)

Terra	Blu	Blu intenso	Indian red
1130-067	1130-061	1130-068	1130-069

Test pack 2 kg (1 x 2000 g)

Terra	Blu	Blu intenso	Indian red
1130-K67	1130-K61	1130-K68	1130-K69

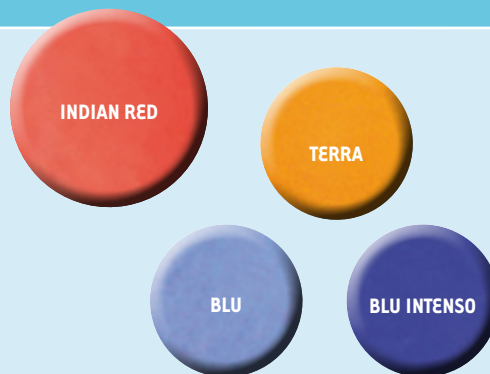

PRODOTTI ASSOCIATI

KIMBERLIT Gesso naturale extraduro ad alta densità per modelli maestri.



TENSIO-SIL Riduttore di tensioni per alginato e silicone. Modelli senza porosità.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Fax +34 972 525 586

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com