

# TECHNO SIN Tixo



AUTOPOLIMERIZZANTI / RESINE



## RESINA ORTODONTICA

- TECNICA "SALE E PEPE"
- FACILE MODELLAZIONE GRAZIE ALLA SUA PROPRIETÀ TISSOTROPICA (LA RESINA NON CADE)
- TRASPARENTE, SENZA PORI E NON INGIALLENTE

CE

1639

MD

TIPO 1 • ISO 20795-2:2013



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# TECHNO SIN Tixo

**RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZZANTE PER LA FABBRICAZIONE DI APPARECCHI ORTODONTICI RIMOVIBILI. ADATTO ALLA TECNICA "SALE E PEPE" CON UN COMPORTAMENTO PARTICOLARMENTE TISSOTROPICO.**

## PROPRIETÀ

Facile manipolazione, stabilità del colore, lavorazione veloce.

## VANTAGGI

- Polimerizzazione veloce
- Trasparente
- Senza pori
- Non ingiallente

## TECNICA DI APPLICAZIONE

Erogare il liquido da un misurino per evitare contaminazioni.  
Applicare il liquido sul modello (10-20 gocce), distribuendolo uniformemente per formare una pellicola sottile.  
Cospargere la polvere sul modello umido e rimuovere l'eccesso.  
Ripetere l'applicazione a strati fino a raggiungere lo spessore desiderato.  
Terminare con uno strato di monomero per migliorare la levigatezza della superficie.  
Polimerizzare in acqua a 40-45 °C sotto pressione (2 bar) per 8-10 minuti.

## RIFINITURA E LUCIDATURA

TECHNO SIN Tixo può essere rifinita e pulita con il metodo usuale. Si consiglia l'utilizzo delle paste POLI-R per la molatura e lucidatura e POLI-B per la lucidatura finale. Le riparazioni possono essere effettuate con lo stesso materiale.

## FORMATO DI VENDITA

9065-M20 **Kit Intro** 80 g  
80 g + 60 ml + Dosificatore

9065-020 **Polvere** 2 x 500 g 1 kg  
9065-030 **Polvere** 8 x 500 g 4 kg

9066-020 **Liquido** Bottiglia 500 ml  
9066-030 **Liquido** Lattina 2000 ml

## PRODOTTI ASSOCIATI

### ORTOGUIX

Gesso pietra speciale per modelli da studio in ortodonzia.



### TECHNOSIL

Liquido isolante per resine (resina-gesso).


### TECHNOSIL SUPER

Liquido isolante speciale per resine, crea una pellicola sottilissima.



### STRATOGEL 3D

Gel di separazione per modelli 3D.

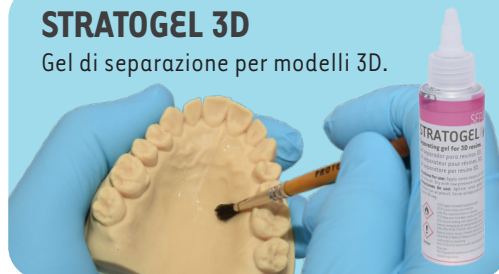

**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)