

PROTEC-FIX



FOTOPOLIMERIZABLES / RESINAS



REPARACIÓN DE DENTADURAS EN 10 MINUTOS

- REPARADOR DE DENTADURAS FOTOPOLIMERIZABLE
- ALTO NIVEL DE ESTABILIDAD
- FÁCIL APLICACIÓN MEDIANTE JERINGA



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

PROTEC-FIX

RESINA EN FORMA DE GEL FOTOPOLIMERIZABLE, ESPECIALMENTE PARA REPARACIONES.

PROPIEDADES

PROTEC-FIX polimeriza entre 360 y 480 nm, mediante cualquier dispositivo standard de foto polimerización dentro del rango especificado. Fotopolimerización sin vacío.

COMPOSICIÓN: Resinas de acrilato y metacrilato, aditivos y pigmentos.

APLICACIONES

- Elaboración de prótesis inmediatas anteriores para una pieza
- Rellenado de rebases en prótesis parcial
- Acabados de pequeños rebases en prótesis parciales o implantes
- Reparaciones causadas por grietas o fracturas en dentaduras acrílicas
- Fijación de dientes rotos en prótesis completas o parciales
- Reparación rápida de carillas anteriores
- Corrección de burbujas, poros y grietas en bases de dentadura acrílica


VENTAJAS

- Fácil aplicación mediante jeringa
- Alto nivel de estabilidad
- Resultados rápidos y precisos sin tener que usar silicona para matrices
- No contiene MMA

ELABORACIÓN

Una vez abierto, utilizar las cánulas de un solo uso proporcionadas para una aplicación más precisa.

Tapar nuevamente la jeringa después de su uso.

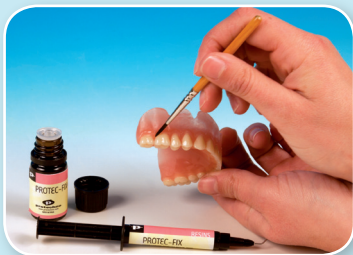

1. Aplicar **PROTEC-FIX Bonder** antes de aplicar la resina con un pincel en cada parte acrílica (o diente).



2. Polimerizar aproximadamente 3 min.



3. Seguidamente aplicar **PROTEC-FIX** con la jeringa. Aplique una capa uniforme de material (1-2 mm).



4. Polimerizar aproximadamente 3 min.

Para aplicar material una vez polimerizado no elimine la capa de inhibición en la superficie, ya que garantiza un sellado óptimo y evita cualquier tensión en la resina.

Una vez finalizado, retirar las capas de inhibición de la superficie con instrumentos rotatorios o isopropanol.

ACABADO Y PULIDO

Finalizada la polimerización se puede acabar y pulir con el método acostumbrado. Recomendamos el uso de las pastas **POLI-R** para el pulido y **POLI-B** para el abrillantado.

FORMATO DE VENTA Y COLORES

Kit Standard

9030-100 3 Jeringas (3 g) PROTEC-FIX rosa
+ 5 ml PROTEC-FIX bonder
+ 12 puntas aplicadoras

Accesorios:

9030-100 Linterna luz ultravioleta



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com
www.protechno.com