




ISOGIPS

SÉPARATEURS

NOUVEAU

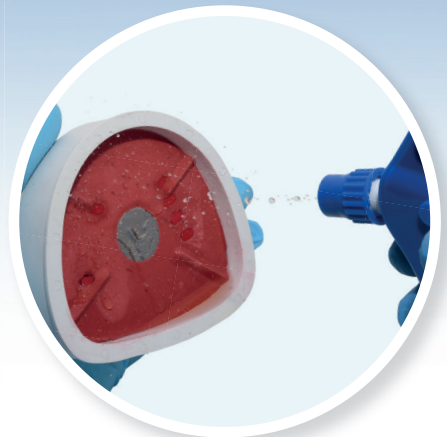

SÉPARATEUR PLÂTRE-PLÂTRE

- SÉPARATION EFFICACE ET RAPIDE
- NE FORME PAS DE PELLICULE
- PÉNÈTRE DANS LA SURFACE ET FERME LES PORES



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

ISOGIPS


AGENT SÉPARATEUR PLÂTRE-PLÂTRE.

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS ISOLANTES.

PÉNÈTRE LA SURFACE DU PLÂTRE ET FERME LES PORES OUVERTS.

SÉPARATION EFFICACE DES COMPOSANTS DU PLÂTRE SANS FORMATION DE FILM ENTRE EUX APPLICATIONS.

APPLICATIONS

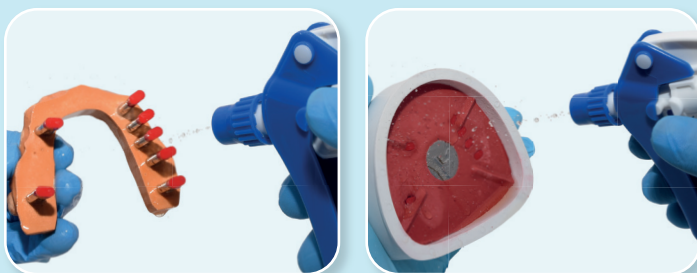

- Séparation d'arcades avec pins à la base socle
- Séparation de Split-Cast
- Séparation du modèle au plâtre pour la mise en articulateur

AVANTAGES

- Séparation très rapide
- Ne forme pas de pellicule
- Pénètre la surface et ferme les pores
- La surface durcit, il devient lisse et hydrofuge à l'eau

NOTICE D'EMPLOI

Appliquer le produit uniformément sur le modèle de plâtre par pulvérisation.

Laisser sécher environ 10 secondes

Enlever le produit en excès et sécher avec air comprimé.

CONDITIONNEMENT

3215-100	Bouteille	1.000 ml
3215-025	Spray	250 ml

PRODUITS PARTENAIRES




KIMBERLIT

Plâtre naturel hautes performances.



QUICK-ROCK

Plâtre spécial pour la mise en articulateur.

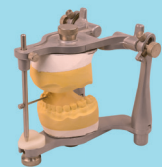

FLU-STONE

Plâtre à socle de consistance fluide.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com